

Kapilary chromatograficzne Viper

Thermo
SCIENTIFIC


Opatentowany, innowacyjny system uniwersalnych połączeń **Thermo Scientific** typu **Viper™ capillary** zrewolucjonizował pracę z zestawami UHPLC i HPLC, w tym również w skali „nano” (**nanoViper**).

Połączenia typu **Viper™** to specjalnie opracowane kapilary pozwalające na połączenie poszczególnych elementów zestawu bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi, a przy tym zapewniające szczelność układu nawet przy ciśnieniach dochodzących do 1500 bar!

Precyzyjne dopasowanie tych połączeń nie generuje dodatkowej objętości martwej systemu HPLC/UHPLC i specyfikowane jest jako „zero dead volume - zero objętości martwej”, co pozwala na uzyskanie najwyższej sprawności i rozdzielczości prowadzonych analiz.

Główne zalety połączeń typu **Viper™**:

- uniwersalny typ podłączenia - istnieje możliwość zastosowania w aparatach różnych producentów,
- szczelność połączeń nawet w zakresie ciśnień **do 1500 bar**
- dostępne są w wersji biokompatybilnej (inertna; MP35N),
- ręczne dokręcanie i odkręcanie (nie są potrzebne jakiegokolwiek narzędzia)

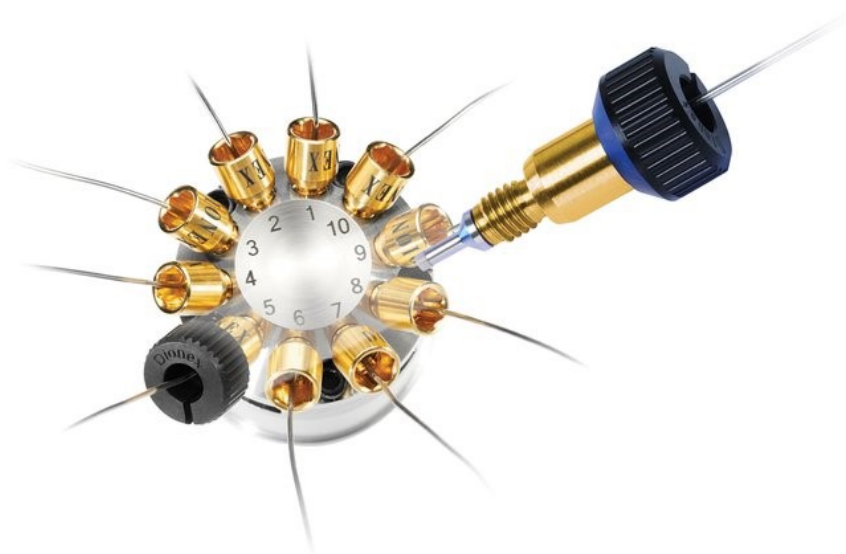

Więcej informacji na stronie [producenta](#)